

## MoliMed® Micro Light



Spec.-No.: D 3.2424f  
Departamento: SM-SPE  
Fecha: 01.09.2005  
Página: 1 de 3

### **1. Descripción general del producto**

MoliMed® Micro Light es un absorbente de incontinencia con forma anatómica. Contiene capa Dry Plus y núcleo superabsorbente. Dispone de un recubrimiento completo de non woven, y de una cubierta exterior de tejido transpirable. Proporciona una óptima seguridad, gracias a su alta capacidad de absorción y capacidad de retención de orina, y garantiza protección contra el retorno de humedad. Es especialmente confortable y discreto; se fija fácilmente en las prendas interiores mediante una tira adhesiva.

MoliMed® Micro Light lleva el marcado CE de acuerdo con la directiva EU 93/42/EEC para productos sanitarios. El producto está clasificado como clase I, no estéril.

### **2. Aplicaciones / Indicaciones**

Está indicado para su uso en incontinencia ligera de orina, como protección tras cirugía vaginal o como absorbente postparto.

### **3. Presentaciones**

MoliMed® Premium Micro Light

### **4. Características del producto**

Capa protectora de la piel	Film de non woven laminado, air active
Núcleo absorbente (2 capas)	100% pulpa de celulosa, blanqueada sin cloro, pulpa de celulosa con polímero superabsorbente
Capa distribuidora (Dry Plus)	Celulosa, Curled fiber, blanca
Adhesivo	Hotmelt
Non woven	Polipropileno hidrofílico
Tira adhesiva	Papel siliconado

## MoliMed® Micro Light




Spec.-No.: D 3.2424f  
 Departamento: SM-SPE  
 Fecha: 01.09.2005  
 Página: 2 de 3

### 5. Dimensiones del producto

#### MoliMed® Micro Light

Presenta relieves que marcan la posición del cuerpo absorbente

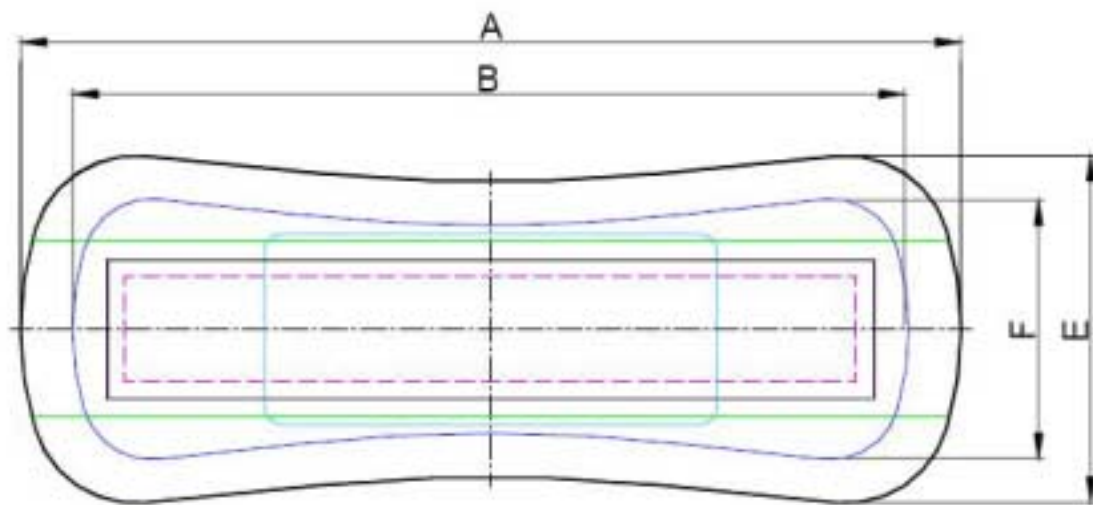

Zeichnungsdatei: 01-004412-01

Dimensiones (mm)		MoliMed Micro Light
Longitud total	A	220 ± 6
Anchura total	E	98 ± 6
Longitud total, cuerpo absorbente	B	200 ± 6
Anchura total, cuerpo absorbente	F	78 ± 6

## MoliMed® Micro Light



Spec.-No.: D 3.2424f  
 Departamento: SM-SPE  
 Fecha: 01.09.2005  
 Página: 3 de 3

### 6. Requerimientos del producto

Características	MoliMed® Micro Light
Peso total con el envase unitario (g)	9,1 min. 7,1
Peso del polímero superabsorbente (g)	1,5 min. 0,9
Test de centrifugado (g) o (ml)	45 min. 25

### 7. Etiquetado

Número de lote con código de 9 dígitos:

Ejemplo:

5	066	XXXXX
año	día de producción	código para uso interno

### 8. Acondicionamiento

MoliMed® Micro Light se envasa unitariamente y se presenta en bolsas de polietileno. Éstas se envasan en caja de transporte de cartón según normas DIN, y se empaquetan en Europallets.